



**1 Fijación del cartucho de cuchilla**

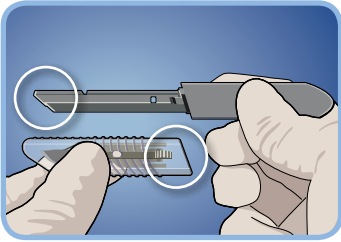


Alinee las orientaciones del mango y del cartucho haciendo coincidir los ángulos de los extremos.

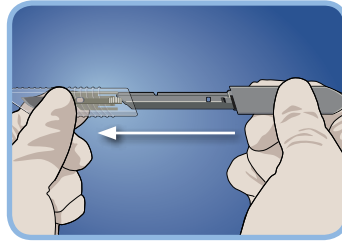


Inserte el mango en el cartucho.

**2 Extensión de la cuchilla**

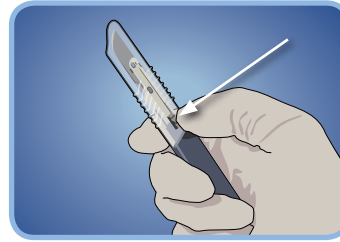


Pulse el botón del cartucho.

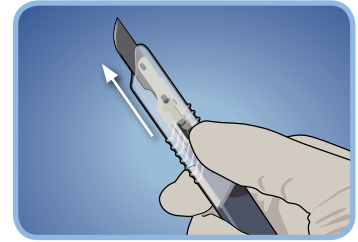

Deslice el botón hacia delante hasta que se bloquee.

**3 Retracción de la cuchilla**

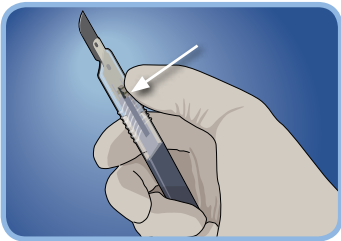


Pulse el botón del cartucho.




Deslice el botón hacia atrás hasta que se bloquee.

**4 Desprendimiento del cartucho de cuchilla**

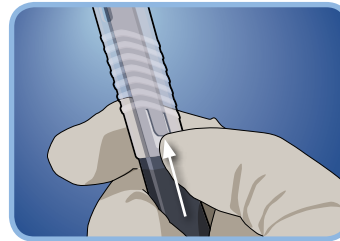

Levante la lengüeta de liberación (vista dorsal).

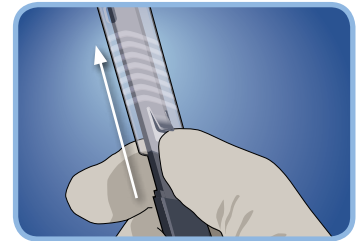

Deslice el cartucho hacia delante para expulsarlo.

**Este dispositivo está diseñado para ser usado una vez. La reutilización del mismo puede causar contaminación cruzada del paciente.**

**Vista ventral (lado del botón)**



Botón

**Vista dorsal (lado de la lengüeta de liberación)**



Lengüeta de liberación

Visite [anzenscalpel.com](http://anzenscalpel.com) o póngase en contacto con nosotros:

3883 Rogers Bridge Road NW  
Suite 501  
Duluth, Georgia 30097, USA

+1-404-855-3655 | tel  
+1-770-559-4382 | fax  
sales@medipurpose.com

Un producto de **MediPurpose**<sup>™</sup>  
www.medipurpose.com