



1 Attacco della cartuccia della lama

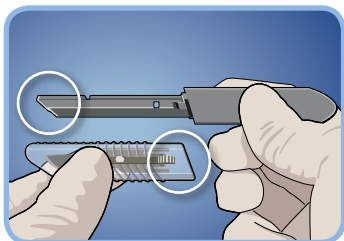

Allineare l'orientamento dell'impugnatura e della cartuccia facendo coincidere gli angoli terminali.

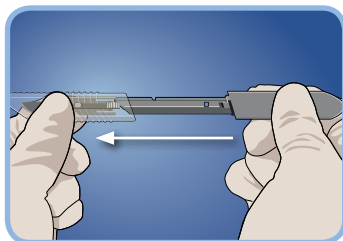


Inserire l'impugnatura nella cartuccia.

2 Estensione della lama




Premere il pulsante sulla cartuccia.

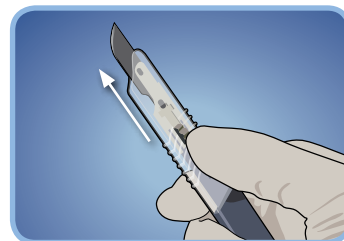


Far scorrere il pulsante in avanti fino al blocco.

3 Ritiro della lama

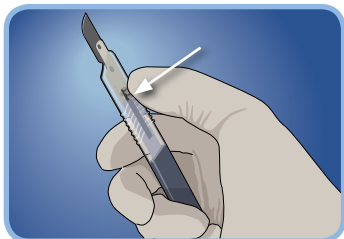


Premere il pulsante sulla cartuccia.

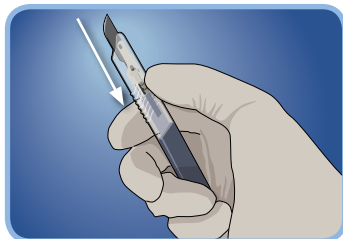


Far scorrere il pulsante all'indietro fino al blocco.

4 Distacco della cartuccia della lama

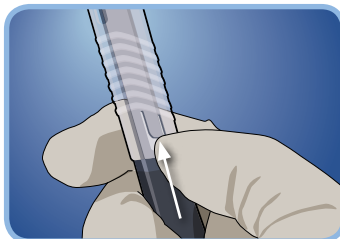

Sollevare la linguetta di rilascio (vista del retro).

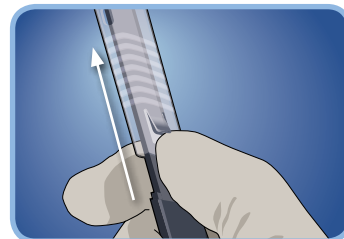


Far scorrere la cartuccia in avanti per espellerla.

Dispositivo solo monouso. Il riutilizzo di questo dispositivo può comportare la contaminazione incrociata del paziente.

Vista del fronte (lato del pulsante)



Vista del retro (lato della linguetta di rilascio)

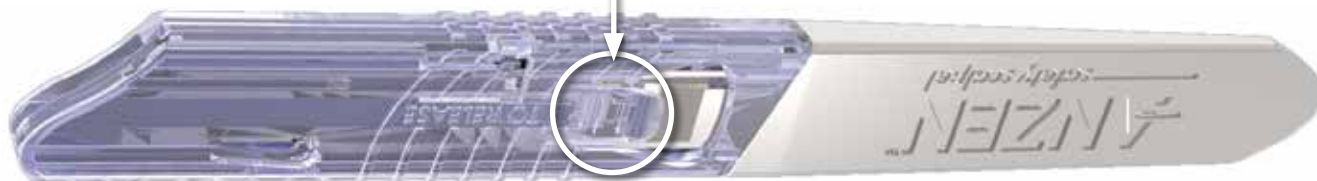

Pulsante

Linguetta di rilascio

Visitare anzenscalpel.com o contattare:

3883 Rogers Bridge Road NW
Suite 501
Duluth, Georgia 30097, USA

+1-404-855-3655 | tel
+1-770-559-4382 | fax
sales@medipurpose.com