



1 Attacco della cartuccia della lama

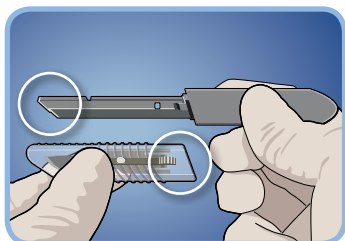


Allineare l'orientamento dell'impugnatura e della cartuccia facendo coincidere gli angoli terminali.

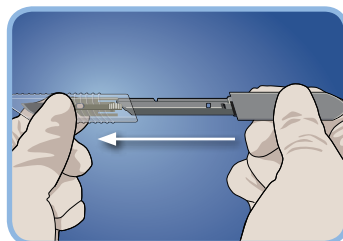


Inserire l'impugnatura nella cartuccia.

2 Estensione della lama

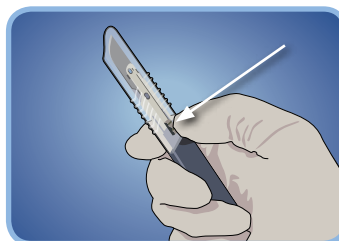


Premere il pulsante sulla cartuccia.

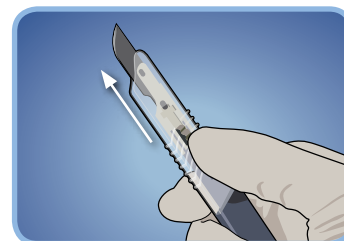


Far scorrere il pulsante in avanti fino al blocco.

3 Ritiro della lama

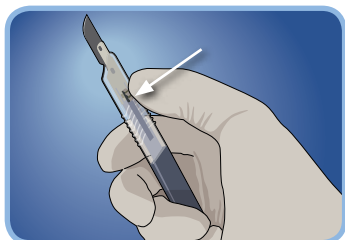


Premere il pulsante sulla cartuccia.

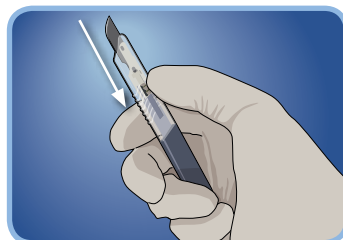


Far scorrere il pulsante all'indietro fino al blocco.

4 Distacco della cartuccia della lama

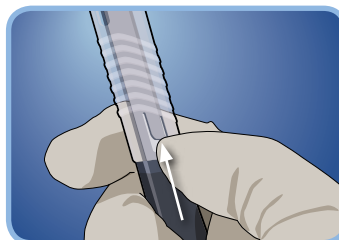

Sollevare la linguetta di rilascio (vista del retro).

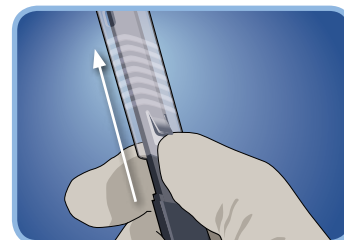


Far scorrere la cartuccia in avanti per espellerla.

Dispositivo solo monouso. Il riutilizzo di questo dispositivo può comportare la contaminazione incrociata del paziente.


1. Avvertenza: Solo per uso su un solo paziente. Non utilizzare se la confezione è rotta; Non conservare in ambienti ad alta temperatura, alta umidità o con gas corrosivi. Non utilizzare se il prodotto è umido o scaduto.
2. Il bisturi di sicurezza Anzen è progettato per essere utilizzato da professionisti del settore medico.
3. In caso di incidente grave, contattare MediPurpose all'indirizzo sales@medipurpose.com e/o l'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente.

Vista del fronte (lato del pulsante)

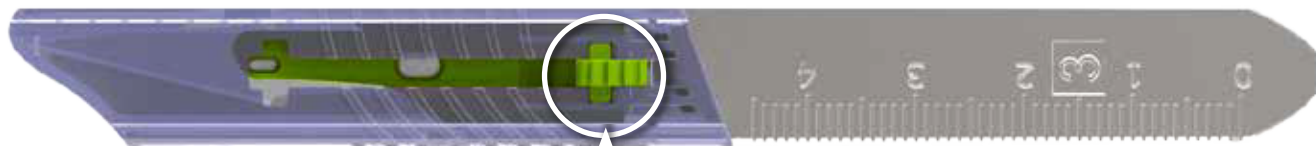

Pulsante

Vista del retro (lato della linguetta di rilascio)

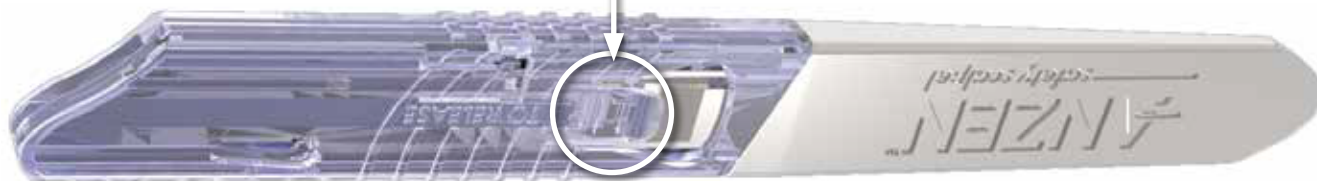

Linguetta di rilascio

Visitare anzenscalpel.com o contattare:



MEDIPURPOSE PTE. LTD.
10 Anson Road, #12-08
International Plaza, Singapore 079903



Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatara, BKR 4013 Malta



3883 Rogers Bridge Road NW, Suite 501, Duluth, Georgia 30097, USA
tel +1-404-855-3655 | fax +1-770-559-4382 | sales@medipurpose.com

©2022 MediPurpose Pte Ltd

Un prodotto di **MediPurpose™**
www.medipurpose.com