



1 Fixar o cartucho da lâmina

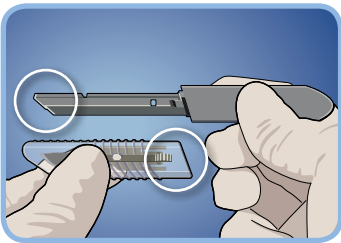


Alinhe as orientações do punho e do cartucho fazendo corresponder os ângulos das extremidades.

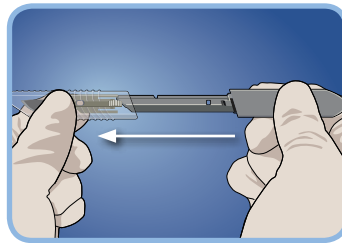


Insira o punho no cartucho.

2 Estender a lâmina

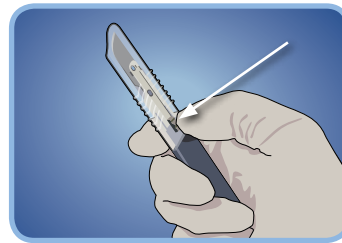


Prima o botão no cartucho.

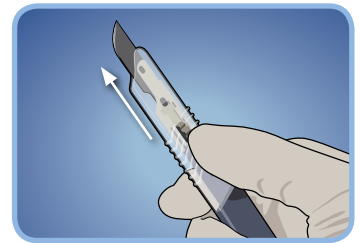


Faça deslizar o botão para a frente até encaixar.

3 Retrair a lâmina

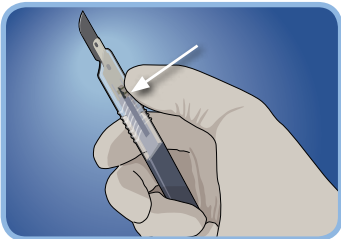


Prima o botão no cartucho.

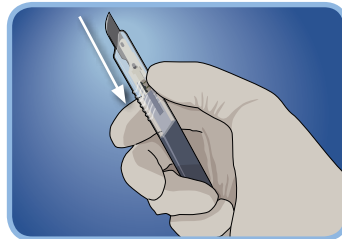


Faça deslizar o botão para trás até encaixar.

4 Libertar o cartucho da lâmina

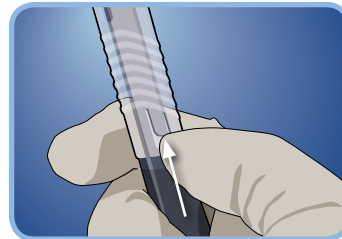

Levante a patilha de libertação (vista dorsal).

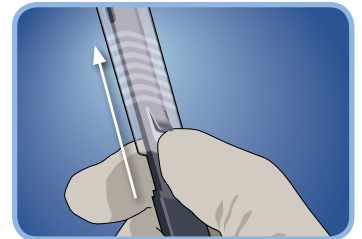


Para ejetar, faça deslizar o cartucho para a frente.

O dispositivo é para uso único apenas. A reutilização deste dispositivo pode levar a contaminação cruzada do paciente.

Vista ventral (lado de baixo)



Vista dorsal (lado da patilha de libertação)

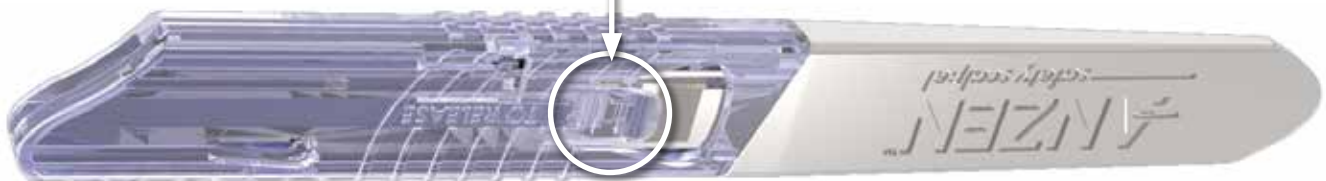

Botão

Patilha de libertação

Visite anzenscalpel.com ou contacte-nos:

3883 Rogers Bridge Road NW
Suite 501
Duluth, Georgia 30097, USA

+1-404-855-3655 | tel
+1-770-559-4382 | fax
sales@medipurpose.com