



**1 Fixar o cartucho da lâmina**

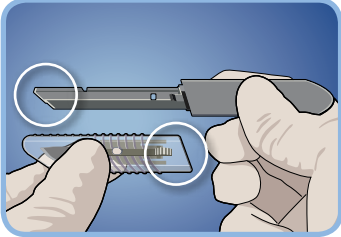


Alinhe as orientações do punho e do cartucho fazendo corresponder os ângulos das extremidades.

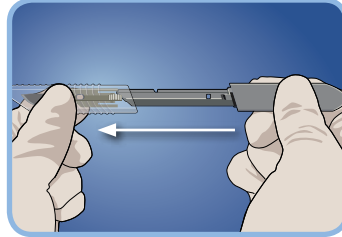


Insira o punho no cartucho.

**2 Estender a lâmina**

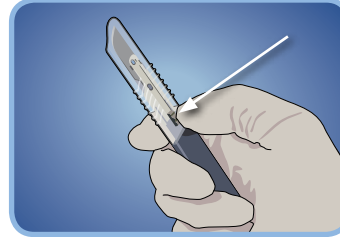


Prima o botão no cartucho.

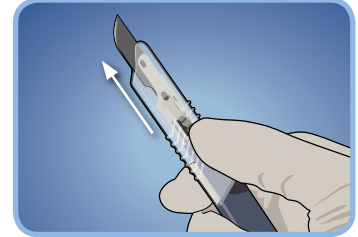

Faça deslizar o botão para a frente até encaixar.

**3 Retrair a lâmina**

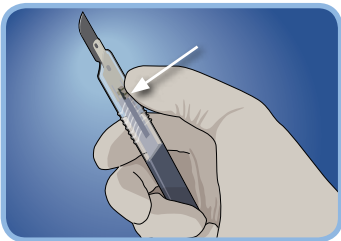


Prima o botão no cartucho.




Faça deslizar o botão para trás até encaixar.

**4 Libertar o cartucho da lâmina**

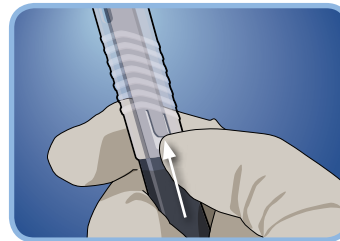

Levante a patilha de libertação (vista dorsal).

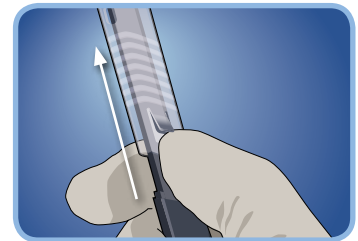


Para ejetar, faça deslizar o cartucho para a frente.


**O dispositivo é para uso único apenas. A reutilização deste dispositivo pode levar a contaminação cruzada do paciente.**

1. Aviso: Somente para uso em um único paciente. Não use se a embalagem estiver quebrada; Não armazene em ambiente de alta temperatura, alta umidade ou com gás corrosivo. Não use se o produto estiver úmido ou vencido.
2. O Bisturi de Segurança Anzen foi projetado para ser usado por profissionais médicos.
3. Em caso de incidente grave, contacte a MediPurpose em [sales@medipurpose.com](mailto:sales@medipurpose.com) e/ou a autoridade competente do Estado-Membro em que ocorreu o incidente.

**Vista ventral (lado de baixo)**

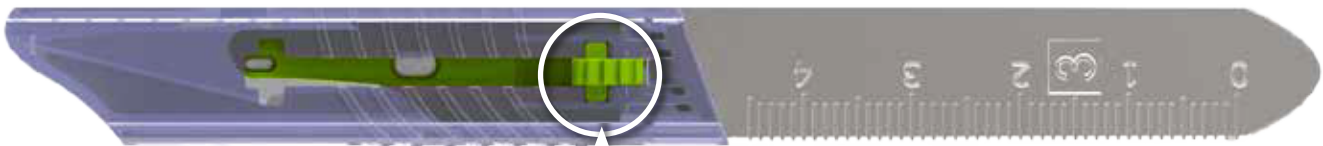

**Vista dorsal (lado da patilha de libertação)**

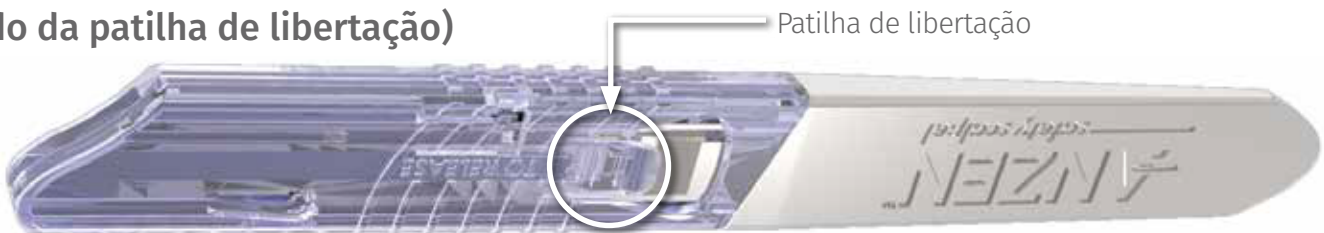

Botão

Patilha de libertação

Visite [anzenscalpel.com](http://anzenscalpel.com) ou contacte-nos:

**MEDI-PURPOSE PTE. LTD.**  
10 Anson Road, #12-08  
International Plaza, Singapore 079903

**EC REP** Advena Ltd.  
Tower Business Centre, 2nd Fl.,  
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



3883 Rogers Bridge Road NW, Suite 501, Duluth, Georgia 30097, USA  
tel +1-404-855-3655 | fax +1-770-559-4382 | [sales@medipurpose.com](mailto:sales@medipurpose.com)

©2022 MediPurpose Pte Ltd

Um produto da **MediPurpose™**  
[www.medipurpose.com](http://www.medipurpose.com)