



1 Fixar o Cartucho da Lâmina


2 Estender a Lâmina

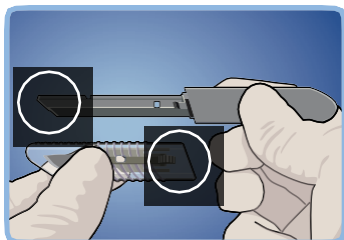


Alinhe as Orientações do Cabo e do Cartucho fazendo corresponder os ângulos das extremidades.

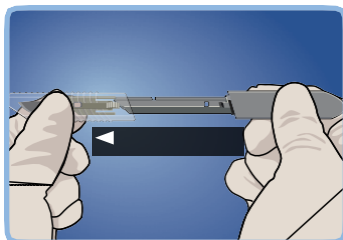

Insira o Cabo no Cartucho.

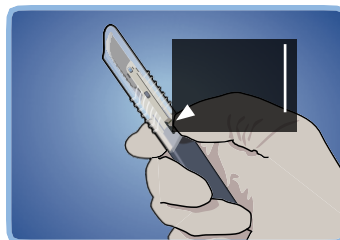


Prima o Botão no Cartucho.

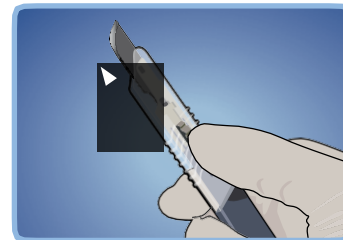


Faça deslizar o botão para a frente até encaixar.

3 Retrair a Lâmina


4 Libertar o Vartucho da Lâmina

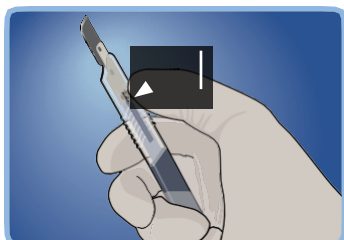


Prima o Botão no Cartucho.

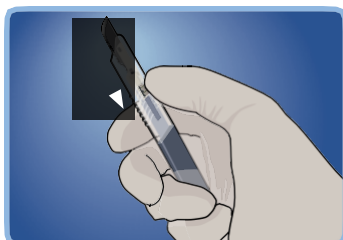

Faça Deslizar o botão para trás até encaixar.

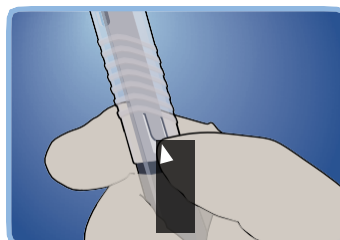

Levante a Patilha de Libertação (Vista Dorsal).

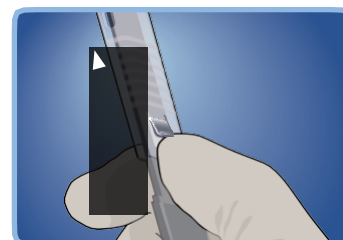


Para ejectar, faça deslizar o cartucho para a frente.

O dispositivo é para uso único apenas. A reutilização deste dispositivo pode levar a contaminação cruzada do paciente.

1. Aviso: Somente para uso em um único paciente. Não use se a embalagem estiver danificada; Não armazene em ambiente de alta temperatura, alta humidade ou com gás corrosivo. Não use se o produto estiver húmido ou fora do prazo de validade.
2. O Bisturi de Segurança Anzen foi concebido para ser usado por profissionais médicos.
3. Em caso de incidente grave, contacte a MediPurpose em sales@medipurpose.com e/ou a autoridade competente do Estado-Membro em que ocorreu o incidente.

Vista ventral (lado de baixo)

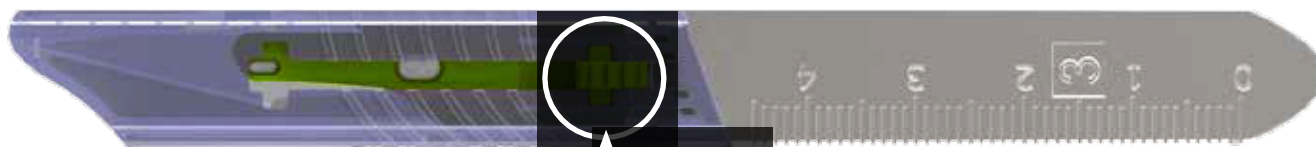

Vista dorsal

(lado da patilha de libertação)



Visite anzenscalpel.com ou contacte-nos:



MEDIPURPOSE PTE. LTD.
10 Anson Road, #12-08
International Plaza, Singapore 079903



Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



2862 Buford Hwy, Suite 105, Duluth, Georgia 30096, USA
tel +1-404-855-3655 | fax +1-770-559-4382 | sales@medipurpose.com

©2025 MediPurpose Pte Ltd

Um produto da **MediPurpose**TM
www.medipurpose.com