



1 Fijación del cartucho de cuchilla

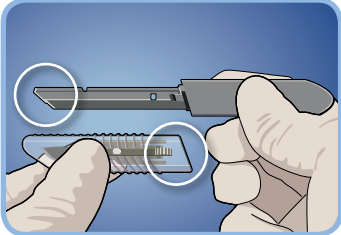


Alinee las orientaciones del mango y del cartucho haciendo coincidir los ángulos de los extremos.

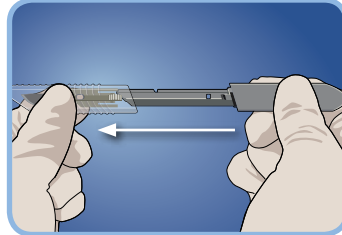


Inserte el mango en el cartucho.

2 Extensión de la cuchilla

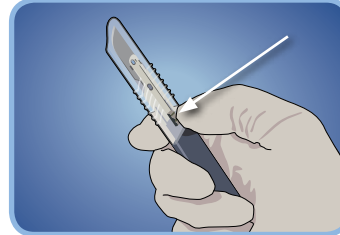


Pulse el botón del cartucho.

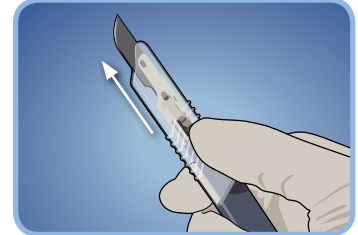


Deslice el botón hacia delante hasta que se bloquee.

3 Retracción de la cuchilla

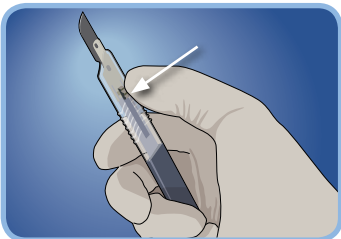


Pulse el botón del cartucho.

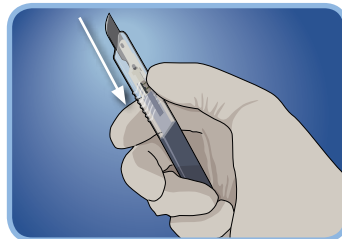


Deslice el botón hacia atrás hasta que se bloquee.

4 Desprendimiento del cartucho de cuchilla

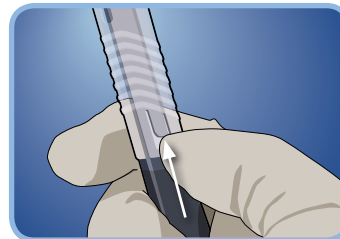

Levante la lengüeta de liberación (vista dorsal).

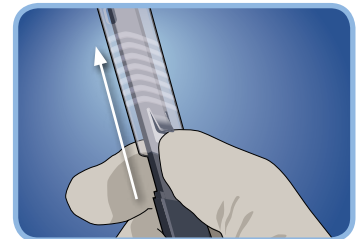


Deslice el cartucho hacia delante para expulsarlo.

Este dispositivo está diseñado para ser usado una vez. La reutilización del mismo puede causar contaminación cruzada del paciente.


1. Advertencia: Solo para uso en un solo paciente. No lo use si el paquete está roto; No **almacene** en ambientes con temperatura alta, de gran humedad o con gas corrosivo. No lo use si el producto está húmedo o vencido.
2. El bisturí de seguridad Anzen está diseñado para ser utilizado por profesionales médicos.
3. En caso de un incidente grave, póngase en contacto con MediPurpose en sales@medipurpose.com y/o con la autoridad competente **de su país** en el que se produjo el incidente.

Vista ventral (lado del botón)

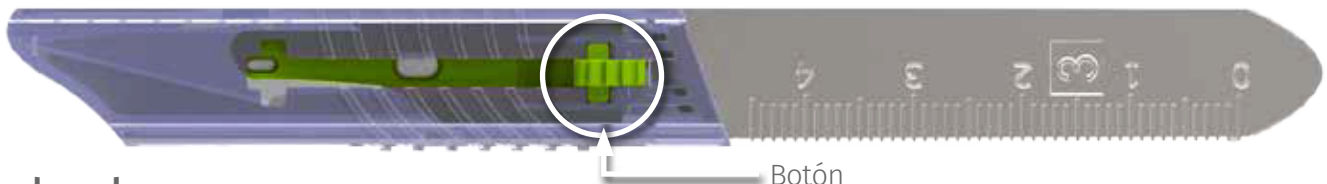

Botón

Vista dorsal (lado de la lengüeta de liberación)

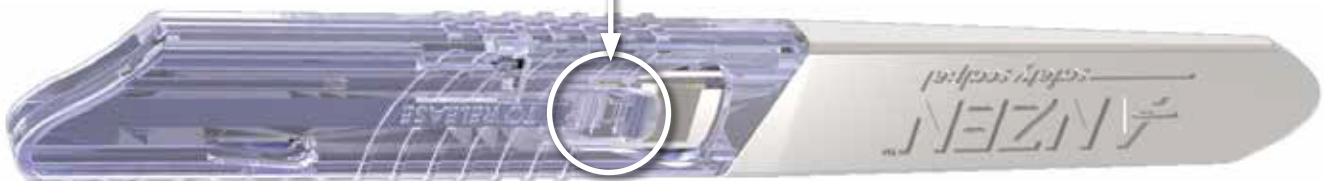

Lengüeta de liberación

Visite anzenscalpel.com o póngase en contacto con nosotros:

MEDI PURPOSE PTE. LTD.
10 Anson Road, #12-08
International Plaza, Singapore 079903

EC REP Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Fl.,
Tower Street, Swatara, BKR 4013 Malta

CE 0197

MD

3883 Rogers Bridge Road NW, Suite 501, Duluth, Georgia 30097, USA
tel +1-404-855-3655 | fax +1-770-559-4382 | sales@medipurpose.com

©2022 MediPurpose Pte Ltd

Un producto de **MediPurpose**[™]
www.medipurpose.com