

ANZEN™
Bistouri de sécurité

Mode d'emploi

1 Connexion de la cartouche de lame

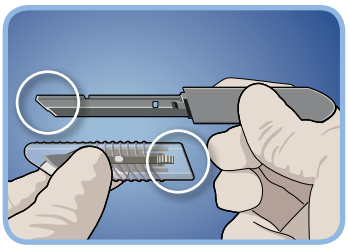

Aligner la poignée avec la cartouche en faisant correspondre les angles des extrémités.

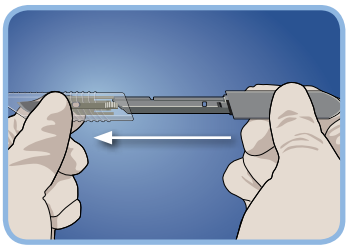


Insérer la poignée dans la cartouche de lame.

2 Extension de la lame




Appuyer sur le bouton de la cartouche.

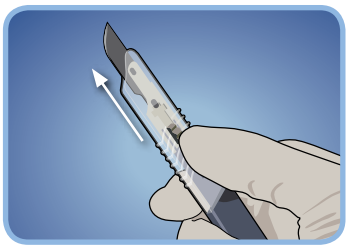


Glisser le bouton vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

3 Rétraction de la lame

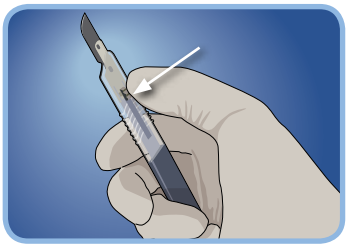


Appuyer sur le bouton de la cartouche.

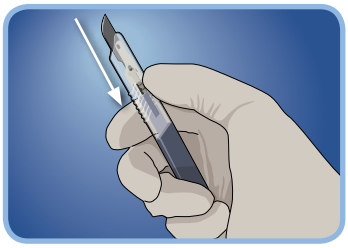


Glisser le bouton vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

4 Déconnexion de la cartouche de lame

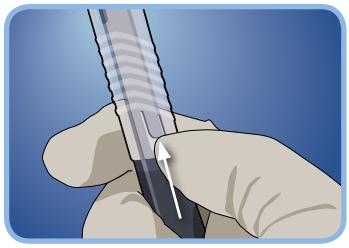

Soulever la languette de déconnexion (vue dorsale).

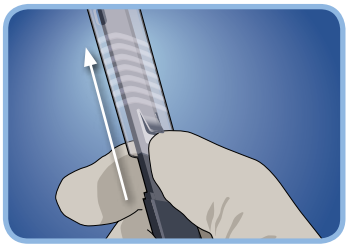


Glisser la cartouche vers l'avant pour l'éjecter.


Ce dispositif est à usage unique seulement. Sa réutilisation peut entraîner une contamination croisée

1. **Avertissements :** À usage unique. La réutilisation peut entraîner une contamination croisée entre patients.
2. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
3. Ne pas stocker dans un environnement soumis à des températures élevées, à une forte humidité ou en présence de gaz corrosifs.
4. Ne pas utiliser si le produit est humide ou périmé.
5. Le **Scalpel de Sécurité Anzen™** est destiné à être utilisé par des professionnels de santé.
6. Après utilisation, jetez-le dans un conteneur pour objets tranchants.
7. Le manche du **Scalpel de Sécurité Anzen™** peut être stérilisé à l'autoclave et réutilisé, conformément aux instructions d'utilisation disponibles via le lien figurant sur le site web.
8. En cas d'incident grave, veuillez contacter MediPurpose à l'adresse **sales@medipurpose.com** et/ou l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit.

Vue ventrale (côté bouton)

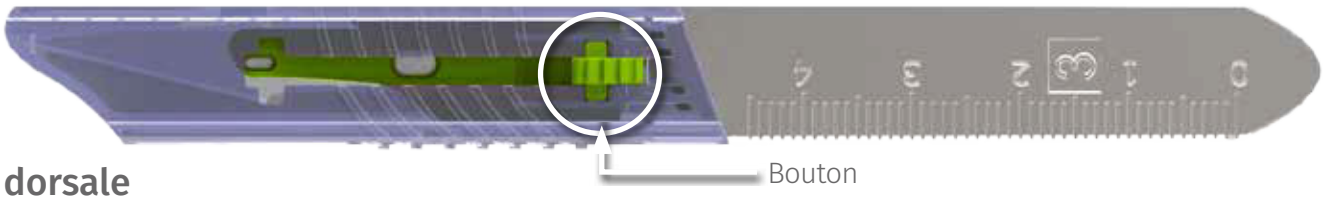

Vue dorsale (côté languette de déconnexion)

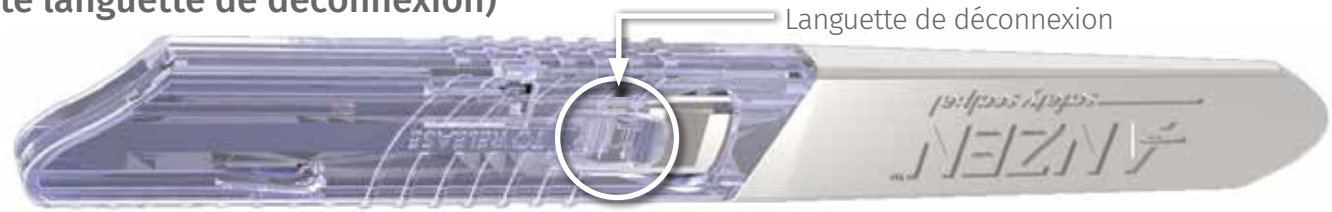

Visitez anzenscalpel.com ou contactez nous :

MEDIPURPOSE PTE. LTD.
10 Anson Road, #12-08
International Plaza, Singapore 079903

EU REP Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

CE 0197 MD

2862 Buford Hwy, Suite 105, Duluth, Georgia 30096, USA
tel +1-404-855-3655 | fax +1-770-559-4382 | sales@medipurpose.com

©2026 MediPurpose Pte Ltd

Un produit de MediPurpose™
www.medipurpose.com