

ANZEN™
Bisturi de segurança

Instruções de utilização

1 Fixar o cartucho da lâmina

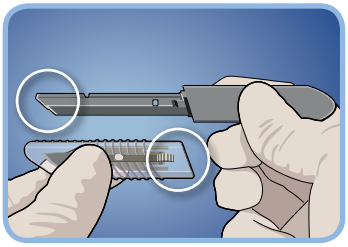

Alinhe as Orientações do Cabo e do Cartucho fazendo corresponderos ângulos das extremidades.

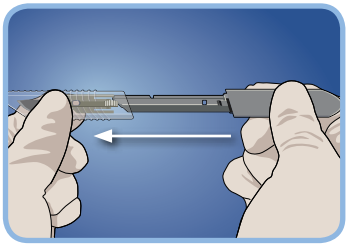


Insira o Cabo no Cartucho.

2 Estender a lâmina




Prima o Botão no Cartucho.

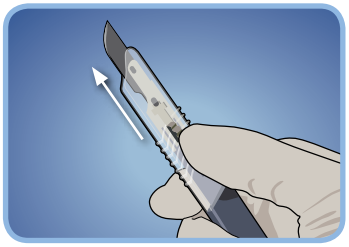


Faça deslizar o botão para a frente até encaixar.

3 Retrair a lâmina

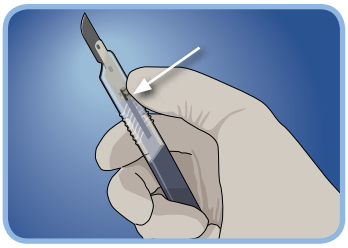


Prima o Botão no Cartucho.

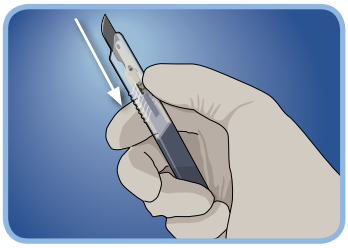


Faça Deslizar o botão para trás até encaixar.

4 Libertar o Vartucho da lâmina

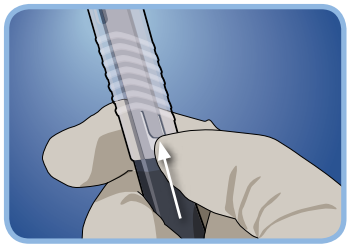

Levante a Patilha de Libertação(Vista Dorsal).

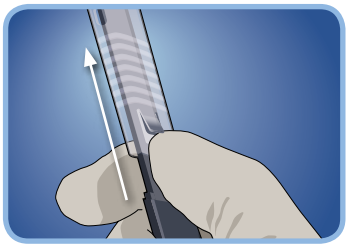


Para ejectar, faça deslizar o cartuchopara a frente.


O dispositivo é para uso único apenas. A reutilização deste dispositivo pode levar a contaminação cruzada do paciente.

1. **Avisos:** Apenas para uso num único paciente. A reutilização pode causar contaminação cruzada entre pacientes.
2. Não utilizar se a embalagem estiver danificada
3. Não armazenar em ambientes com temperatura elevada, humidade elevada ou na presença de gases corrosivos.
4. Não utilizar o produto se estiver húmido ou fora do prazo de validade.
5. O **Anzen™ Safety Scalpel** foi concebido para ser utilizado por profissionais médicos.
6. Após a utilização, descarte-o num recipiente para objectos cortantes.
7. O cabo do **Anzen™ Safety Scalpel** pode ser esterilizado em autoclave e reutilizado, conforme indicado nas instruções disponíveis através da ligação do site.
8. Em caso de incidente grave, contacte a MediPurpose através do **sales@medipurpose.com** e/ou a autoridade competente do Estado-Membro em que ocorreu o incidente.

Vista ventral (lado de baixo)

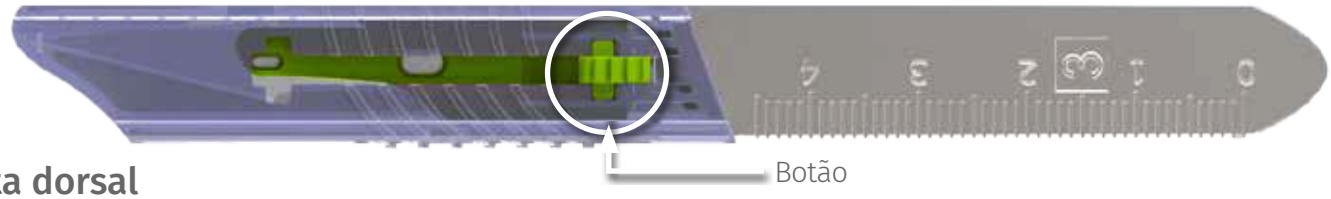

Vista dorsal (lado da patilha de libertação)

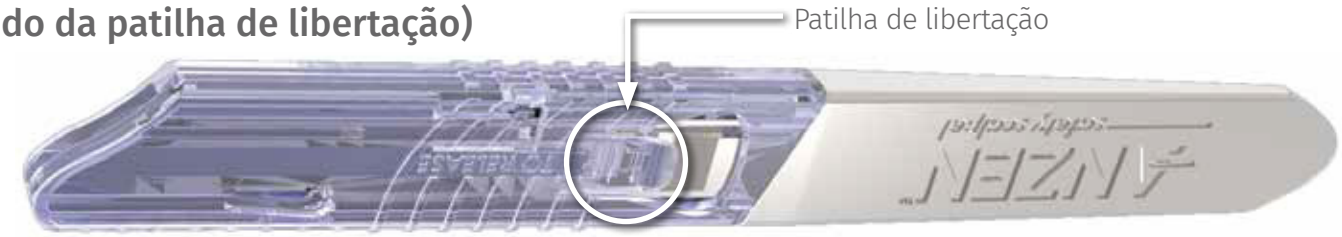

Visite anzenscalpel.com ou contacte-nos:

MEDIPURPOSE PTE. LTD.
10 Anson Road, #12-08
International Plaza, Singapore 079903

EU REP Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

CE 0197 MD

2862 Buford Hwy, Suite 105, Duluth, Georgia 30096, USA
tel +1-404-855-3655 | fax +1-770-559-4382 | sales@medipurpose.com

©2026 MediPurpose Pte Ltd

Um produto da MediPurpose™
www.medipurpose.com