

ANZEN™
Bisturí de seguridad

Instrucciones de uso

1 Fijación del cartucho de cuchilla

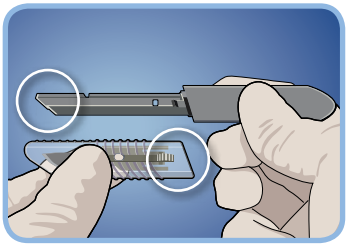

Alinee las orientaciones del mango y del cartucho haciendo coincidir los ángulos de los extremos.

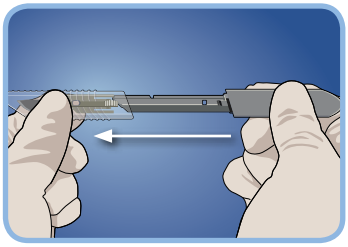


Inserte el mango en el cartucho.

2 Extensión de la cuchilla




Pulse el botón del cartucho.

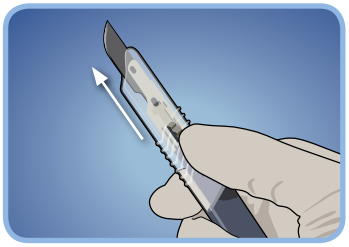


Deslice el botón hacia delante hasta que se bloquee.

3 Retracción de la cuchilla

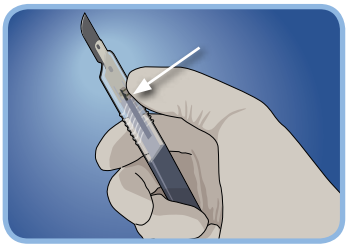


Pulse el botón del cartucho.

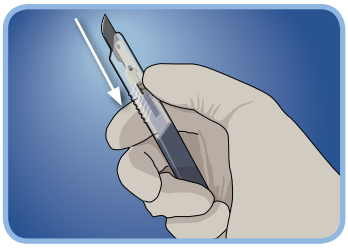


Deslice el botón hacia atrás hasta que se bloquee.

4 Desprendimiento del cartucho de cuchilla

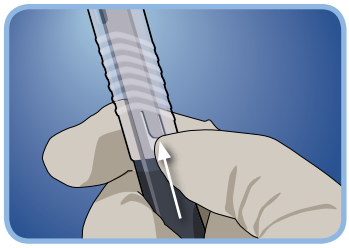

Levante la lengüeta de liberación (vista dorsal).

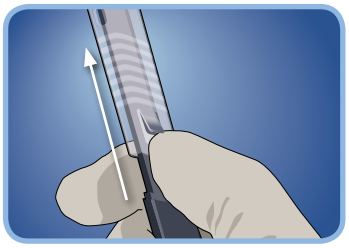


Deslice el cartucho hacia delante para expulsarlo.


Este dispositivo está diseñado para Usarse una vez. La reutilización del mismo puede causar contaminación cruzada del paciente.

1. **Advertencias:** Para uso en un solo paciente exclusivamente. La reutilización puede provocar contaminación cruzada entre pacientes.
2. No utilizar si el envase está roto.
3. No almacenar en entornos con temperaturas elevadas, humedad alta o gases corrosivos.
4. No utilizar si el producto está húmedo o caducado.
5. El **bisturí de seguridad Anzen™** está diseñado para su uso por profesionales sanitarios.
6. Después del uso, deseche el cartucho en un contenedor para objetos punzantes.
7. El mango del **bisturí de seguridad Anzen™** puede esterilizarse en autoclave y reutilizarse según se indica en las instrucciones de uso disponibles a través del enlace del sitio web.
8. En caso de incidente grave, póngase en contacto con MediPurpose en **sales@medipurpose.com** y/o con la autoridad competente del Estado miembro en el que se haya producido el incidente.

Vista ventral (lado del botón)

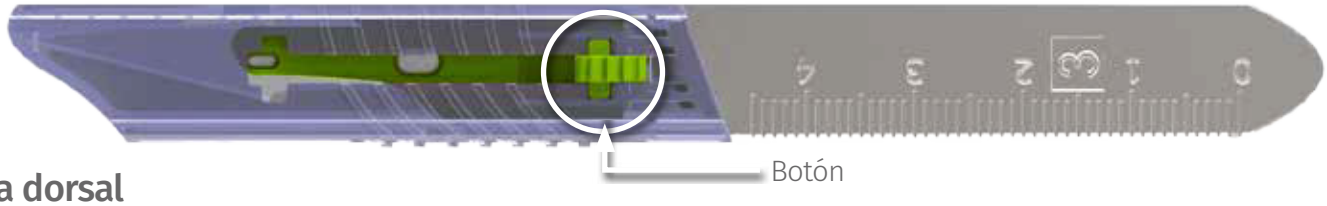

Vista dorsal (lado de la lengüeta de liberación)

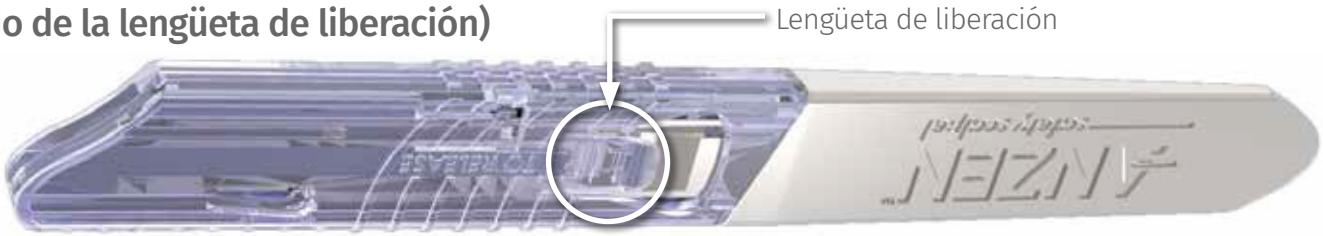

Visite anzenscalpel.com o póngase en contacto con nosotros:

MEDIPURPOSE PTE. LTD.
10 Anson Road, #12-08
International Plaza, Singapore 079903

EU REP Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

CE 0197 MD

2862 Buford Hwy, Suite 105, Duluth, Georgia 30096, USA
tel +1-404-855-3655 | fax +1-770-559-4382 | sales@medipurpose.com

©2026 MediPurpose Pte Ltd

Un producto de MediPurpose™
www.medipurpose.com